


# **Návod na použitie Laserová helma na podporu rastu vlasov Model C96**


**LASER HAIR GROWTH CAP**

The photon energy injected new vitality to the hair

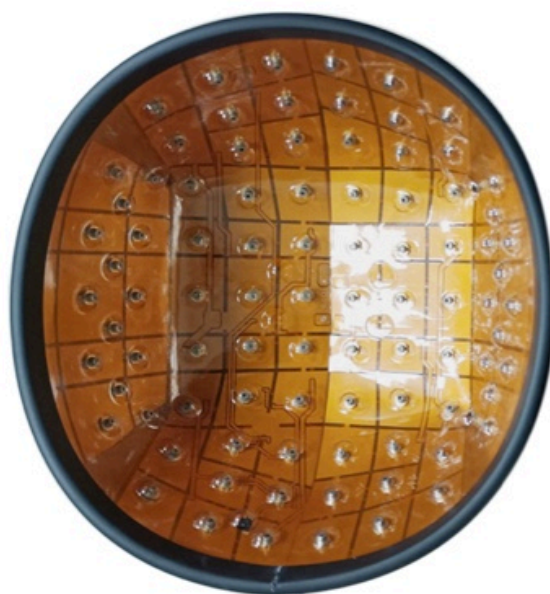

**96 laserových diód, plné pokrytie skalpu, porovnateľné s medicínskymi laserovými prístrojmi na podporu rastu vlasov**

**Laserová prilba na podporu rastu vlasov obsahuje 96 laserových radiačných bodov. Obsahuje silikónové výstupky aby sa body dostali bližšie k pokožke a dosiahol sa najlepší možný efekt.**

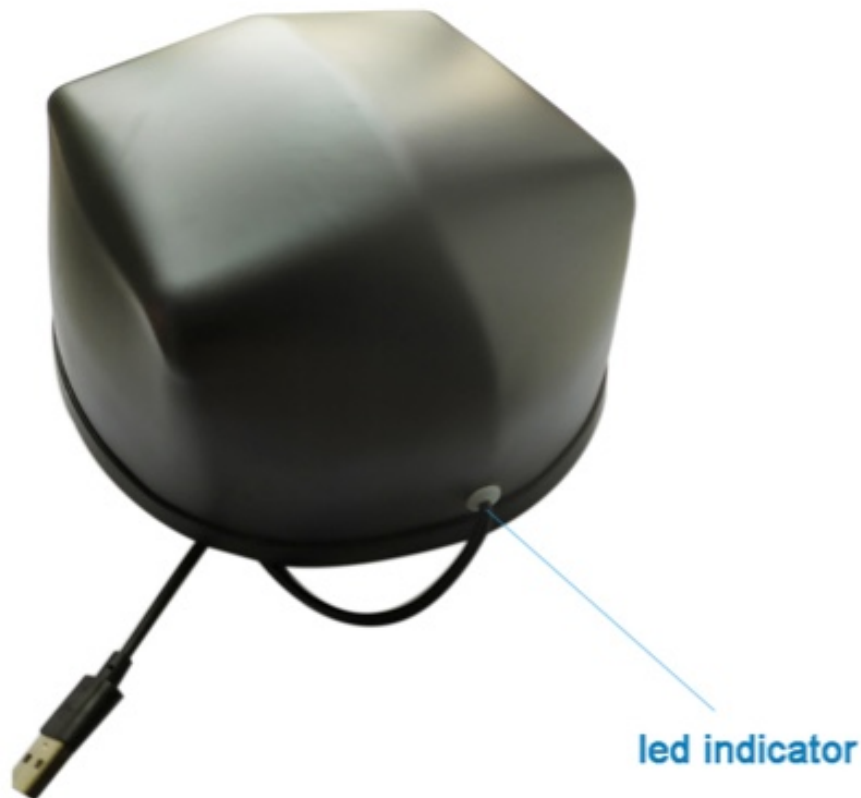

**Ak pripojíte USB kábel k USB nabíjačke, LED indikátor svieti červeno a prístroj vydáva pípanie. Ak sa nasadí na hlavu, zapne sa laserové svetlo a LED indikátor svieti žlto a indikuje, že lasery sú v prevádzke. Ak sa zloží prístroj z hlavy lasery sa vypnú. Vnútri sú dva senzory vyhodnocujúce blízkosť pokožky a len vtedy sa lasery spustia.**

**Varovanie: Nespúšťajte senzory úmyselne rukami aby ste si nesvietili do očí laserovým svetlom.**

**Účinky:**

- **4-18 týždeň sa zlepšuje sekrécia mazu, zastavuje sa strata vlasov**
- **8-26 týždeň, vlasy silnejú, sú viac žiarivé – zdravšie**
- **26-52 týždeň, vlasy prechádzajú do fáz normálneho rastu, narastá objem vlasov**

**Vlnová dĺžka 650 nm:**

**Je najviac historicky osvedčená u množstva typov prístrojov či už elektrických alebo medicínskych prístrojov. Dokáže penetrovat' k vlasovým korenkom, zlepšuje okolo nich mikrocirkuláciu a výživu a stimuluje samotné korenky – energizuje ich.**

**Doba aplikácie:**

**30 minút je optimum pre stimuláciu vlasových korenkov. Kratší čas stimuluje slabšie a dlhší čas už redukuje možné pozitívne účinky.**



**Mechanizmus účinku:**

**Je to absorpcia fotónov v tkanive a korenkoch vlasov, z 96 tich laserových diód.**

**Výsledky:**


**Porovnateľné prístroje preukazujú účinky na rast vlasov. Niektoré boli aj klinicky testované. Prispievajú k zdraviu skalpu a vlasov.**

**Je prístroj vhodný aj pre mňa?**

**Absorpcia a prienik závisia od farby pokožky.**

**U svetlejších je prienik lepší a dosahuje vlasové korenky.**


**Skontrolujte si farebnú schému pokožky dole:**

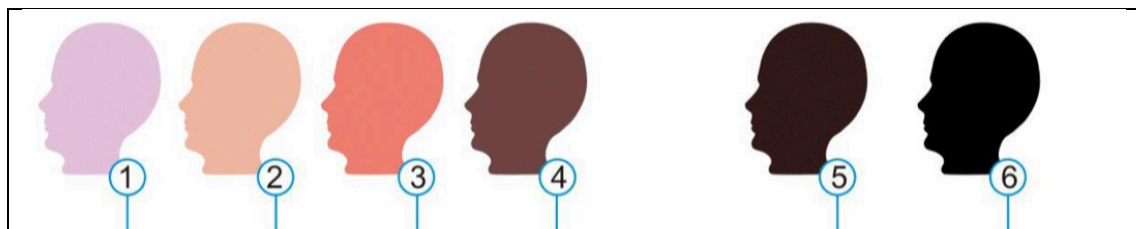

**Prístroj je najviac efektívny u 1-4 a neefektívny u 5-6.**

**Prístroj môže pomôcť ako doplnkové ošetrovanie proti vypadávaniu vlasov, Alopecie, už aj s časťou vypadaných vlasov :**



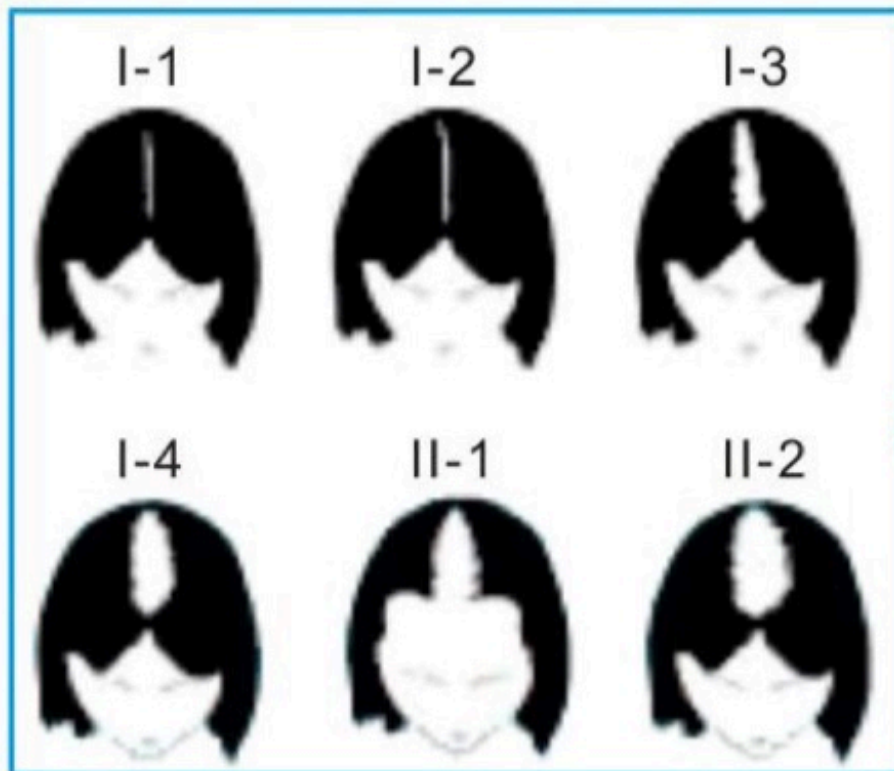

**Prístroj bude viac efektívny u I-1, postupujúc k II-2, kde bude menej efektívny..**



**Účinok pri stavoch podľa tabuľky Hore nie je garantovaný a nie je zdokumentovaný.**

**Uvítame fotografie pred začatím používania, počas a po 52 týždňoch používania a ako distribútor prístroja poskytneme darček. Fotografujte prosím len problémové časti vlasov hlavy ale nie tvár.**



**Upozornenie: prístroj vyhovuje priemeru hlavy do veľkosti 60 cm.**

**Prístroj sa označuje značkou zhody CE.**

**Dovozca: Yalong Trade s.r.o**  
**Email: [yalongtrade@gmail.com](mailto:yalongtrade@gmail.com)**