



Návod na použitie

**LED helma na podporu rastu vlasov
Model C80**

Návod na použitie

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu.

Bezpečnostné upozornenie

- Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa s prístrojom.
- Ak máte alergiu, alebo citlivosť na svetlo, prístroj nepoužívajte.

Balenie obsahuje:

LED helmu, adaptér, USB kábel

Upozornenie

Pred použitím musí byť prístroj nabitý.


Starostlivosť na najvyššej úrovni

LED helma má zabudovaných 80 LED diód pre plné pokrytie skalpu. Účinky LED helmy sú porovnateľné s medicínskymi prístrojmi na podporu rastu vlasov.



Parametre a technické údaje

LED helma má zabudovaných 80 LED diód, čo predstavuje 80 radiačných bodov. LED helma má aj silikónové výstupky, aby sa helma nedotýkala pokožky, aby pokožka voľne dýchala pre najlepšie možné účinky. LED diody sú umiestnené v definovanej vzdialenosti a rozptyľujú svetlo rovnomerne po celej ploche.

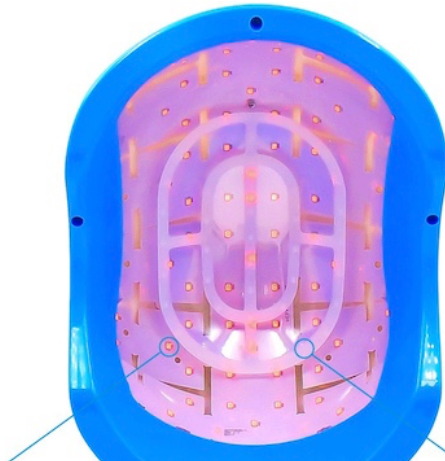

LED diódy

Silikónové výstupky

Vlnová dĺžka: 678nm

Pracovný čas: 20 minút

Batérie: lítové, vstavané

Menovité napätie: 100-240V 50 Hz / 60 Hz (sieťový adaptér)

Menovité napätie: 5V DC / 1.5A (zariadenie)

Pracovná teplota: 60-95 F

Relatívna vlhkosť: 80%

Prístroj sa označuje značkou zhody CE.

Ako často prístroj používať

Odporúčame prístroj používať 2x týždenne 20 minút.

20 minút je optimum pre stimuláciu vlasových korieňov. Kratší čas stimuluje slabšie a dlhší čas už redukuje možné pozitívne účinky. Doba aplikácie bola navrhnutá vzhľadom k celkovému výkonu 400mW aby sa dosiahla optimálna energia na každý jeden cm² pokožky hlavy.


Obsluha

Prístroj má vstavané lítiové batérie a po nabití stačí k spusteniu stlačiť tlačidlo na čelnej strane prístroja. Rovnako sa prístroj aj vypína.

Je pre mňa prístroj vhodný?

LED helmu odporúčame používať užívateľom so svetlou a hnedou pleťou. U veľmi tmavej a čiernej pleti neboli zdokumentované účinky, preto účinky nevieme garantovať. Prístroj je najviac efektívny u 1-4 a neefektívny u 5-6.

Absorpcia a prienik závisia od farby pokožky. U svetlejších je prienik lepší a dosahuje vlasové koreňky. Skontrolujte si farebnú schému pokožky dole:

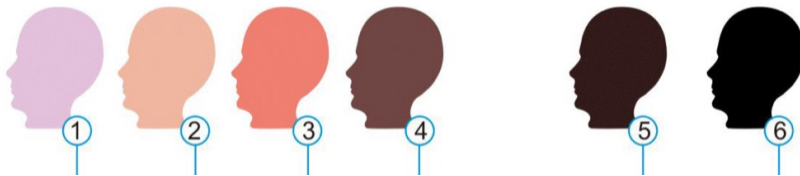

Terapia svetlom

Vlnová dĺžka 678nm: Patrí do pásma optického okna tkanív, pretože tkanivo ju absorbuje slabšie a tak sa môže šíriť hlbšie a dosiahnuť aj po vlasové koreňky. Je dobre osvedčená u množstva typov prístrojov či už elektrických alebo medicínskych prístrojov. Dokáže penetrovat' k vlasovým korenkom, zlepšuje okolo nich mikrocirkuláciu a výživu a stimuluje samotné koreňky – energizuje ich.

Mechanizmus účinku

Je to absorpcia fotónov v tkanive a korenkoch vlasov z 80 tich LED diód.


Výsledky: Porovnateľné prístroje preukazujú účinky na rast vlasov. Niektoré boli aj klinicky testované. Prispievajú k zdraviu skalpu a vlasov.

Účinky

Prístroj môže pomôcť ako doplnkové ošetrovanie vypadávania vlasov, Alopecie, už aj s časťou vypadaných vlasov :

Účinky:

- 4-18 týždeň sa zlepšuje sekrécia mazu, zastavuje sa strata vlasov
- 8-26 týždeň, vlasy silnejú, sú viac žiarivé – zdravšie
- 26-52 týždeň, vlasy prechádzajú do fáz normálneho rastu, narastá objem vlasov

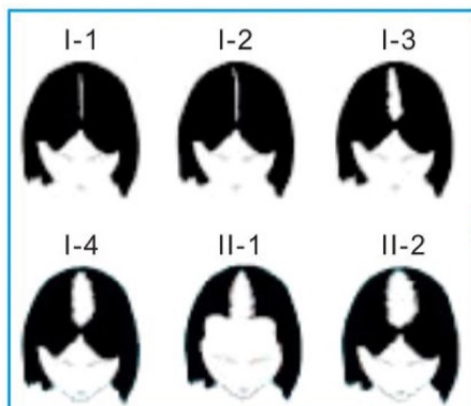

Prístroj bude viac efektívny u I-1, postupujúc k II-2, kde bude menej efektívny..



Účinok pri stavoch hore nie je garantovaný a nie je dostatočne zdokumentovaný.

Informácie o životnom prostredí

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte s bežným domovým odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.

Skladovanie

Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený na dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.

Dovozca

Uvítame Vaše fotografie pred začatím používania, počas a po 52 týždňoch používania a ako dovozca a distribútor prístroja poskytneme za spätnú väzbu darček. Fotografujte prosím len problémové časti vlasov, ale nie tvár kvôli zákonu o ochrane osobných údajov.

Dovozca:
Yalong Trade s.r.o., M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

Email: yalongtrade@gmail.com

Tel: +421 907 173 910

www.kingray.sk

www.kingrayshop.cz

